

ODESSA

Afmelden FMD

Instructie

- Instellen Scanners
- Odessa NMVO Account Configuratie
- Odessa Raadplegen FMD afmeldingen
- Odessa FMD Retour melden



Inleiding

Bij juiste NMVO accountgegevens en goed ingestelde scanners zal Odessa de producten die tijdens het sorteerproces worden gescand automatisch succesvol kunnen afmelden.

Onder de admin kunt u dan ook een product succesvol retour melden.

Instellen scanners

Scheidingstekens

Zorg ervoor dat de scanner bij het scannen van een 2D barcode één van de volgende scheidingstekens gebruikt:

|

[GS]

029

\$

Hiernaast dient de scanner een 'Return' te geven.

Raadpleeg de leverancier / instructie document van uw scanner voor het configureren van uw scanner. U kunt hierbij evt. naar een programma als 'Kladblok' (Notepad) scannen om te controleren of één van bovenstaande scheidingstekens in de scan voorkomt.

Toetsenbord instelling

Een andere belangrijke voorwaarde voor een juiste scan is dat de toetsenbord instelling op US staat. Dit is met name relevant voor het gebruik van scheidingstekens [GS] omdat bij een verkeerde toetsenbord instelling de 'brackets' niet de juiste tekens betreffen.

Dit geldt natuurlijk voor alle werkstations waarop een scanner is aangesloten.

Odessa NMVO Account Configuratie

1. Login met gebruiker 'admin' in de Odessa Sorteert applicatie.



U bent uitgelogd.

- U komt automatisch in het Instellingenmenu. Klik op NMVO

Instellingen

jvo



- Klik op NMVO Account Configuratie



4. Vul de benodigde gegevens in en klik op

Bewaar

NMVO Account Configuratie

🏠 / Instellingen / NMVO / NMVO Account Configuratie

NMVO Account Configuratie

Autorisatie ID

Naam Apotheek

TAN

NMVO Gebruikersnaam

Wachtwoord

Bewaar

Als u wilt weten of u bent aangesloten bij de NMVO kunt u een e-mail sturen naar apotheek@nmvo.nl. Het is daarbij van belang dat u de volgende gegevens vermeld:

- Naam onderneming
- **NMVS-pseudoniem** = 02008179
- KVK-nummer
- gegevens contactpersoon (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
- AIS/HIS-leverancier en softwaresysteem = PI-Farma
- Locaties (apotheken) die onder de onderneming vallen

Note

Indien bovenstaande informatie onjuist is zullen scans niet bij FMD worden afgemeld. Neem contact op met Pharmaned.

Odessa Raadplegen FMD afmeldingen

1. Login met gebruiker 'admin' in de Odessa Sorteër applicatie.




U bent uitgelogd.

Login

2. U komt automatisch in het Instellingenmenu. Klik op NMVO


Instellingen

jvo

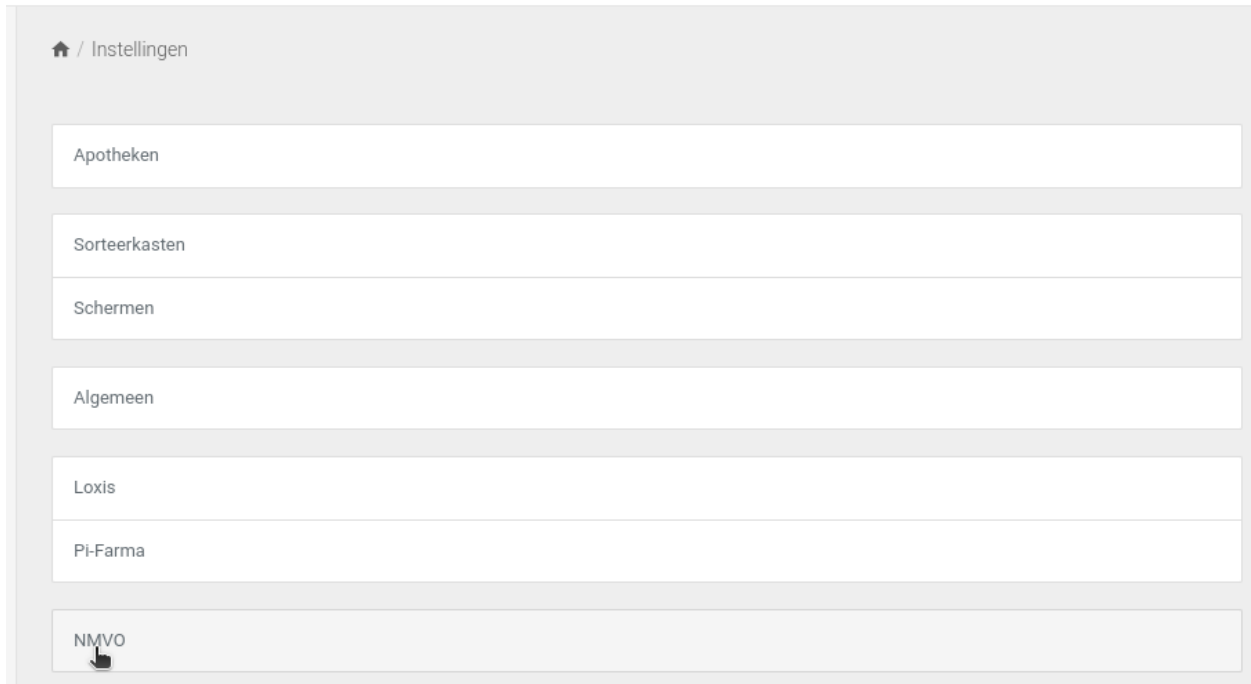

3. Klik op NMVO FMD Afmeldingen

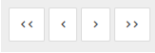

4. U krijgt een overzicht van de 500 meest recente afmeldingen. U kunt met de volgende buttons per 10 of per 1 pagina heen en terug bladeren  .

FMD Afmeldingen

crolox

🏠 / Instellingen / NMVO / FMD Afmeldingen

<< < > >>

Receipt	Ontvangstdatum	NMVS Transaction Id	Schema	Product Code	Batch	Vervaldatum	Pack Serienummer	Aanvraag-type
KW03720	14:47 14-11-2022		GTIN	8718438001712	TAUU	250731	02646558767476	Onbekend
KW03669	14:47 14-11-2022		GTIN	5425028320209	AR5132	240531	0005T10GE4T3	Onbekend
KW03669	14:47 14-11-2022		GTIN	5425028320209	AR5132	240531	00068164A57D	Onbekend
KW03720	14:47 14-11-2022		GTIN	8718438001712	TAUU	250731	06800686793736	Onbekend
KW03720	14:47 14-11-2022		GTIN	8718438001712	TAUU	250731	08671152346298	Onbekend
KW03638	14:59 14-11-2022		GTIN	4054839559556	G01ER7	250228	62003807976	Onbekend
KW03638	14:59 14-11-2022		GTIN	8716955501357	22V00584	240531	T8220092911849	Onbekend

Odessa FMD Retour melden

1. Login met gebruiker 'admin' in de Odessa Sorteert applicatie.



U bent uitgelogd.

2. U komt automatisch in het Instellingenmenu. Klik op NMVO

Instellingen


jvo



3. Klik op NMVO FMD Retour melden



4. Scan de QR code van het product dat u retour wilt melden. Indien de scan een [Enter] bevat zal hij meteen retour melden. Indien de scan geen [Enter] dient u nog op de knop 'Meld retour' te drukken.

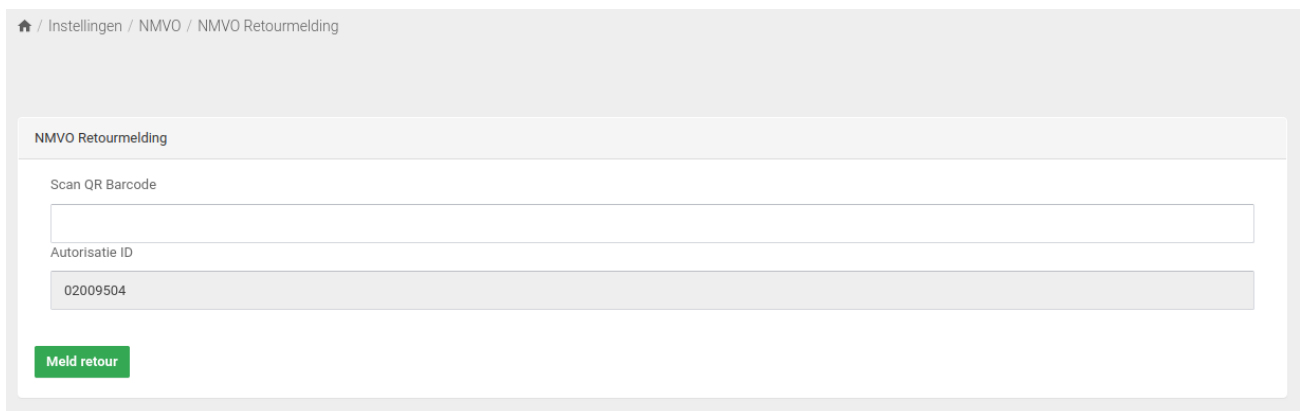

🏠 / Instellingen / NMVO / NMVO Retourmelding

NMVO Retourmelding

Scan QR Barcode

Autorisatie ID

Meld retour

Na een succesvolle retour melding kunt u nogmaals een product afmelden zonder opnieuw naar dit menu te gaan.